



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Перкуссионный массажер Mini SK-
328, серебристый**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
1.1 Внешний вид массажера	3
1.2 Технические характеристики	4
2. Использование массажера.....	4
3. Зарядка устройства	5
4. Показания к применению	5
5. Противопоказания.....	6
6. Комплектация	6


1. Описание устройства

Mini SK-328 —перкуSSIONный вибромассажер, который помогает снять мышечное напряжение, ускорить восстановление после травм. Устройство практически бесшумно. Проработка мышц производится на глубине 16-32 мм.

1.1 Внешний вид массажера



Четыре сменные массажные насадки помогают более эффективно массировать мышцы.

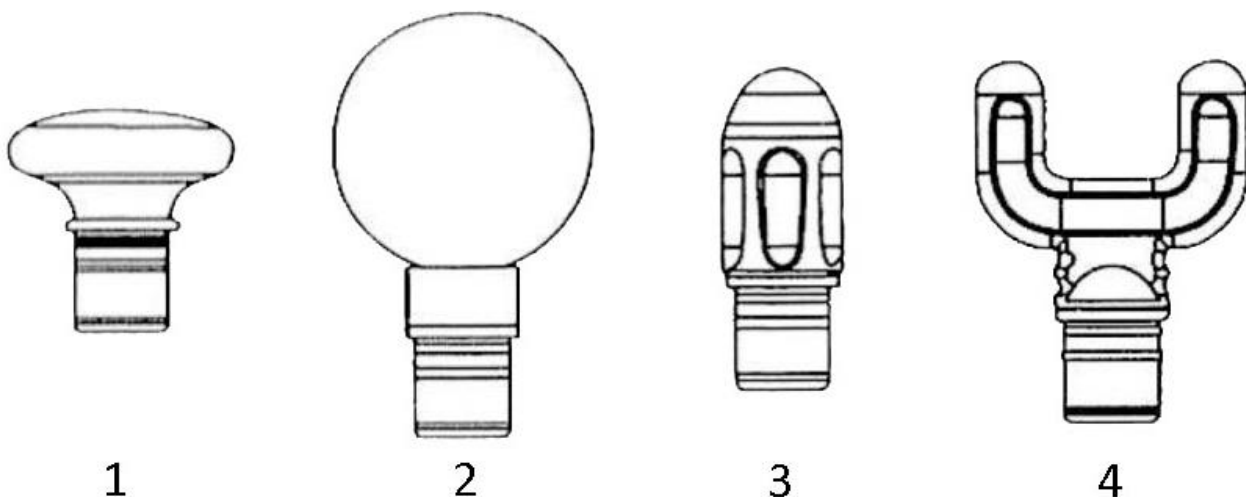

- 1) Плоская массажная насадка подходит для массажа и формирования различных групп мышц.
- 2) Круглая массажная головка подходит для массажа всех мышц, в том числе ладоней, ступней и так далее.

- 3) Массажная насадка цилиндрической формы подходит для проработки глубокого слоя мышц.
- 4) У-образная массажная головка подходит для массажа шеи, позвоночника и ахиллова сухожилия.

1.2 Технические характеристики

- Напряжение: 8,4 В;
- Мощность: 2 А;
- Параметры входящего тока: 5В, 2 А;
- Максимальная скорость: 3200 об/мин;
- Ёмкость батареи: 2000 мАч;

2. Использование массажера



- **Включение и выключение массажера**

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл / Выкл в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

- **Регулировка скорости**

Массажер запускается на первой скорости. Чтобы увеличить скорость, нажмите кнопку питания. Максимальная скорость работы – четвертая. На четвертой скорости нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы переключить массажер на первую скорость.

- **Смена массажной насадки**

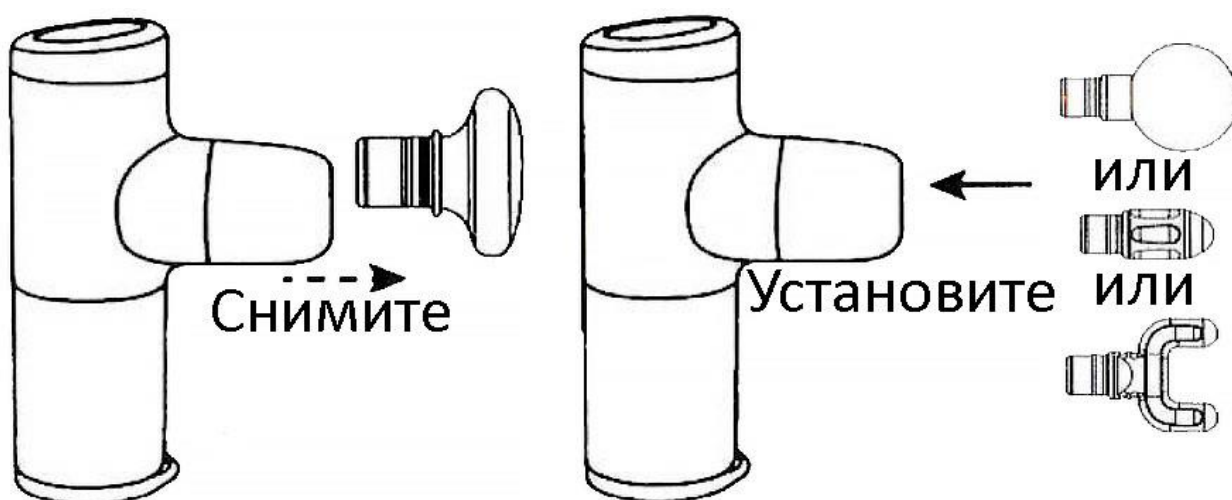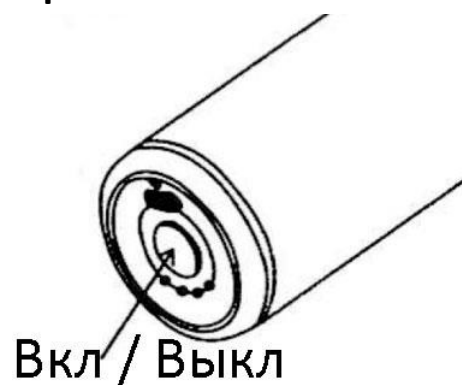

- **Индикаторы**
- Четыре последовательных индикатора на нижней стороне массажера показывают скорость на которой работает устройство. Один индикатор – первая скорость, Два индикатора – вторая скорость. Три светящихся индикатора указывают на работу на третьей скорости. Четыре – четвертая скорость.
- Верхний индикатор показывает статус устройства. Он светит ровным зеленым светом, когда устройство включено. Красным, когда массажер заряжается.



3. Зарядка устройства

Перед первым использованием массажера, полностью зарядите его. Для этого, подключите провод Type-C в соответствующий разъем на массажере. Подключите кабель к адаптеру питания с USB-разъемом, например, от мобильного телефона. Важно, чтобы адаптер имел маркировку 5 В, 2 А.

Индикатор будет гореть красным во время зарядки и зеленым, когда устройство полностью заряжено. Время зарядки составляет от 4 до 11, 5 часов.

Если заряд массажера снизился до 10 %, индикатор начнёт мигать красным светом. Зарядите устройство как можно скорее.

Внимание

Не используйте массажер во время зарядки.

Чтобы продлить срок работы батареи, заряжайте массажер сразу после появления сигнала низкого заряда батареи.

4. Показания к применению

- Облегчить боль и спазм из-за ушиба, растяжения и напряжения мышц;
- Уменьшить отек;
- Массаж рыхлой и утолщенной соединительной ткани или фасции;
- Уменьшить накопление молочной кислоты в мышцах;
- Повысить подвижности суставов;
- Устранить мышечную усталость;

5. Противопоказания

Не используйте массажер, если у вас есть хотя бы одно из нижеследующих противопоказаний:

- Аневризма, кровотечение, приём антикоагулянтов;
- Болезни сердца, установленный кардиостимулятор или ритмоводитель;
- Беременность, рак;
- Устройство запрещено использовать в пределах 8 сантиметров от места проведения операции в течение 90 дней после операции.
- Устройство запрещено использовать на чувствительной области головы, лица, шейных позвонков, по позвоночнику. В местах с меньшим покрытием костей мышцами, например, по выпирающей части большеберцовой кости, тыльной стороне стопы, тыльной стороне кисти и т. д.

6. Комплектация

- Инструкция по использованию;
- Кабель Type-C;
- Корпус массажера;
- Плоская массажная насадка;
- Круглая массажная насадка;
- Цилиндрическая массажная насадка;
- У-образная массажная насадка;

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**